

Eight-Plate

Guided Growth System®



Eight-Plate

Guided Growth System®



ACCIAIO

Eight-Plate

Guided Growth System®



TITANIO

Il sistema Guided Growth eight-Plate e quad-Plate


Una placca extra-periostale, disponibile sia in titanio che in acciaio, che sfrutta il naturale potenziale di crescita delle fisi del bambino, per guidare gentilmente la correzione della deformità angolare.

Intervento mininvasivo per la correzione

L'introduzione della quad-Plate all'interno del sistema Orthofix Guided Growth è volta a offrire più soluzioni per il trattamento delle deformità angolari pediatriche. Ora eight-Plate e quad-Plate sono disponibili sia in titanio che in acciaio.



La crescita guidata viene realizzata con la correzione extra-periostale reversibile in corrispondenza o in prossimità del centro di rotazione (CORA), guidando le fisi del bambino senza comprimerle.

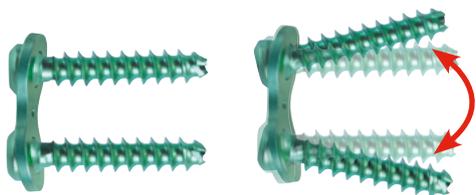

Viti divergenti che fungono da cardine, impedendo la compressione delle fisi.

Il sistema completo Guided Growth, disponibile sia in titanio che in acciaio, comprende varie misure di placche e viti cannulate e solide che sono in grado di offrire la possibilità di un intervento precoce e poco invasivo, per i piccoli pazienti di appena 18 mesi d'età.



delle deformità angolari degli arti

quad-Plate



Ginocchio destro varo



Situazione preoperatoria



Situazione intraoperatoria

Eight-Plate

Guided Growth System™



Paziente di sesso femminile di 13 anni,
con esostosi multipla ereditaria (EME)



Situazione preoperatoria



15 mesi dopo l'intervento di applicazione
della placca, tibia prossimale e distale

Componenti del sistema Guided Growth

TITANIO

Viti

GP224CE	eight-Plate vite cannulata per crescita guidata	24 mm
GP432CE	eight-Plate vite cannulata per crescita guidata	32 mm
GP116CE	eight-Plate vite cannulata per crescita guidata	16 mm
GP624CE	eight-Plate vite solida per crescita guidata	24 mm
GP632CE	eight-Plate vite solida per crescita guidata	32 mm

Placche eight-Plate

GP200CE	eight-Plate placca per crescita guidata	12 mm
GP400CE	eight-Plate placca per crescita guidata	16 mm

Placche quad-Plate

GPQ800CE	quad-Plate placca per crescita guidata	16 mm
GPQ900CE	quad-Plate placca per crescita guidata	22 mm

ACCIAIO

Viti

GPS116CE	Vite cannulata in acciaio per crescita guidata, \varnothing 4.5mm, completamente filettata, non-sterile	16mm
GPS224CE	Vite cannulata in acciaio per crescita guidata, \varnothing 4.5mm, completamente filettata, non-sterile	24mm
GPS432CE	Vite cannulata in acciaio per crescita guidata, \varnothing 4.5mm, completamente filettata, non-sterile	32mm
GPS624CE	Vite solida in acciaio per crescita guidata, \varnothing 4.5mm, completamente filettata, non-sterile	24mm
GPS632CE	Vite solida in acciaio per crescita guidata, \varnothing 4.5mm, completamente filettata, non-sterile	32mm

Placche eight-Plate

GPS200CE	eight-Plate placca per crescita guidata in acciaio, non-sterile	12mm
GPS400CE	eight-Plate placca per crescita guidata in acciaio, non-sterile	16mm

Placche quad-Plate

GPS800CE	quad-Plate placca per crescita guidata in acciaio, non-sterile	16mm
GPS900CE	quad-Plate placca per crescita guidata in acciaio, non-sterile	22mm

Distributore:

Orthofix Srl

Via delle Nazioni, 9 - 37012 Bussolengo (VR)
Tel. +39 045 6719300 - Fax +39 045 6719370



Prodotto da:
ORTHOFIX Srl
Via Delle Nazioni 9, 37012 Bussolengo (Verona) Italia
Telefono +39 045 6719000, Fax +39 045 6719380



orthofix.com

EP-1303-PL-11 D 09/20 (0340844)

Strumentario

GP520CE	Punta perforatore cannulata da 3.2 mm
GP540CE	Filo di Kirschner \varnothing 1.6 mm x 150 mm
GP510CE	Cacciavite cannulato, eight-Plate da 3.5 mm
GP530CE	Strumento guida

Cassette di sterilizzazione

GP900CE	Cassetta di sterilizzazione completa (viti cannulate)
GP901CE	Cassetta di sterilizzazione vuota (viti cannulate)
GP800CE	Cassetta di sterilizzazione completa (viti cannulate/solide)
GP801CE	Cassetta di sterilizzazione vuota (viti cannulate/solide)




Strumentario

GP520CE	Punta perforatore cannulata \varnothing 3,2mm con attacco rapido
GP530CE	Guida perforatore
GP540CE	Filo di K. 1.6mm x 150mm
DH0454CE	Modella placca per placca per crescita guidata in acciaio
DH0455CE	Impugnatura cannulata con attacco rapido
DH0456CE	Estremità esagonale cannulata da 3.5mm con attacco rapido
DH0457CE	Attacco a trattenuta vite per \varnothing 5mm
DH0464CE	Supporto per placca per crescita guidata
DH0474CE	Estrattore per viti per crescita guidata

Cassette di sterilizzazione

GP900CE	cassetta di sterilizzazione completa per placche per crescita guidata in acciaio
GP901CE	Cassetta di sterilizzazione vuota per placche per crescita guidata in acciaio

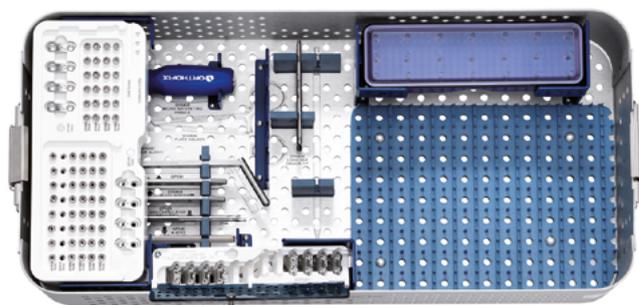

Attenzione: la legge federale statunitense limita la vendita di questo dispositivo esclusivamente su prescrizione di un medico.

La responsabilità di una corretta procedura chirurgica è a carico dei professionisti del settore sanitario. Le tecniche operative fornite sono da considerarsi solo come linee guida informative. La scelta della tecnica da utilizzare è responsabilità dei singoli chirurghi, in base alla propria esperienza e alle credenziali mediche personali. Fare riferimento alle "Istruzioni per l'uso" fornite con il prodotto per informazioni specifiche su indicazioni d'uso, controindicazioni, avvertenze, precauzioni, effetti indesiderati e sterilizzazione.