

Galaxy Fixation

Gemini™ System



Design für Doppelgewinde, unendlich viele Lösungen

Das Galaxy Fixation Gemini™-System ist ein modulares externes Fixationssystem zur Behandlung von Frakturen der unteren und oberen Extremitäten. Es kann als Hybridsystem in Verbindung mit externen Orthofix-Fixateuren aus Ringen verwendet werden.

Einfach

Einzelne Backen können die Verbindung von Stab zu Stab und von Stift zu Stab herstellen.

Vielseitig

Universal-Backen können verschiedene Durchmesser von Stäben und Knochenschrauben aufnehmen, wodurch das modulare System für jeden anatomischen Abschnitt vielseitig einsetzbar ist.

Stabil

Interne Verzahnungs- und Arretierungsmechanismen sorgen für hohe Torsions- und Rutschfestigkeit.

Einfache Anwendung

Einklick-Mechanismus, vorläufiges Festziehen per Hand und endgültige Verriegelung des Nockenverschlusses in einem Schritt. In jedem Backenfach befindet sich eine Markierung zur Kennzeichnung des richtigen Stab-/Knochenschraubendurchmessers.
Vormontierte Multischraubenbacken.



Galaxy Fixation Gemini – Universal-Backen

In einer unsterilen Konfiguration zur Mehrfachverwendung

Marker zur einfachen Identifizierung der Stab- und Stiftdurchmesser

Geänderter, geriffelter Drehknopf und endgültiger Verschlussmechanismus

Intuitives Design mit Sichtkontrolle für die definitive Verriegelung, unabhängig von der Position der Backe

vorläufiges, manuelles Festziehen

Gekerbtes Schnittstellenprofil der Backe und des Gabelschlüssels zum endgültigen Festziehen


- Intraoperative Anpassung der Reposition vereinfachen
- Schneller Fixateuraufbau
- Einfache Anwendung, da keine Instrumente zur primären Fixateurstabilisierung/den Verschluss erforderlich sind

Gewährleistung einer ausreichenden Stabilität des Fixateurs nach dem endgültigen Schließen

Auch in Multipin-Ausführung erhältlich

Galaxy Fixation Gemini UNIVERSAL, EINZELBACKE (94100)

Ermöglicht bis zu 10 verschiedene Verbindungsarten

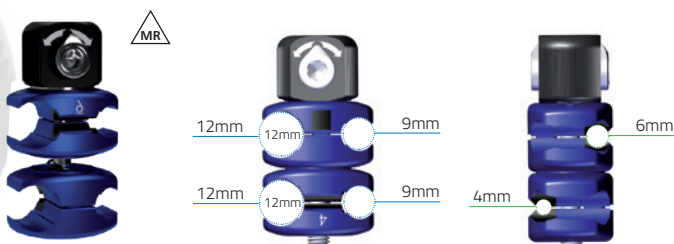

Galaxy Fixation Gemini DOPPELTE UNIVERSAL-MULTISCHRAUBENBACKE (94200)




Galaxy Fixation Gemini UNIVERSAL-MULTISCHRAUBEN-BACKE (94300)




Galaxy Fixation Gemini – Standard-Backen

In steriler Konfiguration für den einmaligen Gebrauch

Galaxy Fixation Gemini
EINZEL-BACKE
(99-94010)

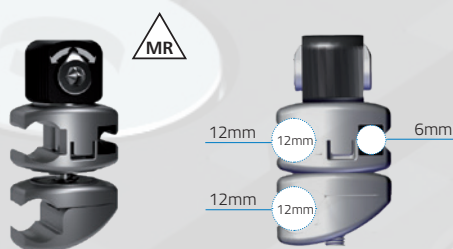

Galaxy Fixation Gemini
ÜBERGANGSEINZEL-
BACKE (99-94030)

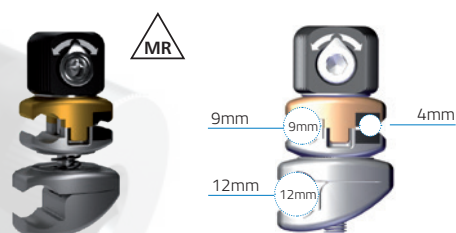

Auch in Multipin-Ausführung erhältlich

Galaxy Fixation Gemini
DOPPELTE MULTISCHRAUBEN-
BACKE, MITTEL (99-94140)



Galaxy Fixation Gemini
DOPPELTE
MULTISCHRAUBEN-BACKE
(99-94040)



Galaxy Fixation Gemini
MULTISCHRAUBEN-BACKE
(99-94020)






Alle diese Backen werden steril ausgeliefert.

Galaxy Fixation Gemini™-System

All-in-one-Sterilisationsbox

Galaxy Fixation Gemini™ Universal-Backen sind mehrfach verwendbar und in unsteriler Konfiguration erhältlich

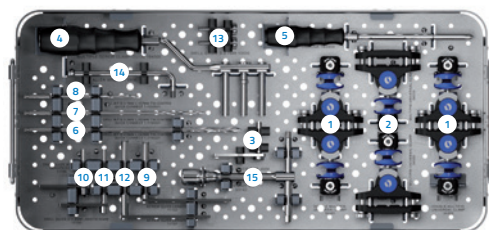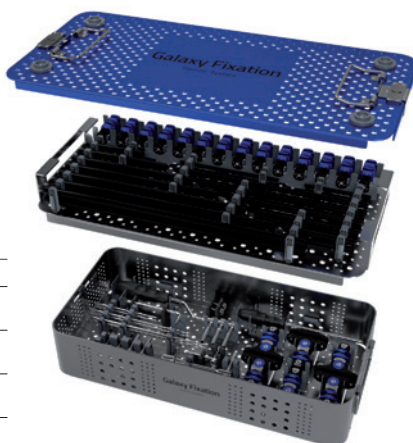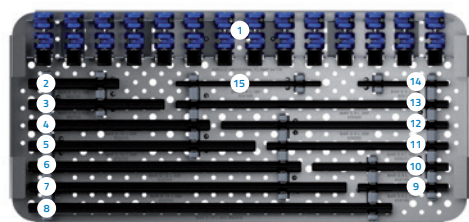

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
1	94100 GALAXY FIXATION GEMINI UNIVERSAL, EINZELBACKE	14
2	932100 Galaxy; Carbonstab; D. 12mm; L. 100mm	2
3	932150 Galaxy; Carbonstab; D. 12mm; L. 150mm	2
4	932200 Galaxy; Carbonstab; D. 12mm; L. 200mm	2
5	932250 Galaxy; Carbonstab; D. 12mm; L. 250mm	2
6	932300 Galaxy; Carbonstab; D. 12mm; L. 300mm	2
7	932350 Galaxy; Carbonstab; D. 12mm; L. 350mm	2
8	932400 Galaxy; Carbonstab; D. 12mm; L. 400mm	2
9	939100 Galaxy; Carbonstab; D. 9mm; L. 100mm	2
10	939150 Galaxy; Carbonstab; D. 9mm; L. 150mm	2
11	939200 Galaxy; Carbonstab; D. 9mm; L. 200mm	2
12	939250 Galaxy; Carbonstab; D. 9mm; L. 250mm	2
13	939300 Galaxy; Carbonstab; D. 9mm; L. 300mm	2
14	936100 Galaxy; Carbonstab; D. 6mm; L. 100mm	2
15	936160 Galaxy; Carbonstab; D. 6mm; L. 160mm	2

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
1	94200 GALAXY FIXATION GEMINI DOPPEL-UNIVERSAL-MULTISCHRAUBENBACKE	2
2	94300 GALAXY FIXATION GEMINI, UNIVERSAL-MULTISCHRAUBENBACKE	2
3	19995 SCHRAUBENFÜHRUNG	2
4	194500 GALAXY FIXATION GEMINI – SCHRAUBENFÜHRUNG	1
5	194400 GALAXY FIXATION GEMINI – TROKAR	1
6	1-1100201 BOHRER MIT SKALA, 4,8mm x 240mm, VERZINNT – SCHNELLKUPPLUNG	2
7	1-1100301 BOHRER MIT SKALA, 3,2mm x 200mm, VERZINNT – SCHNELLKUPPLUNG	2
8	1-1355001 BOHRER MIT SKALA, 2,7mm x 127mm, VERZINNT – SCHNELLKUPPLUNG	2
9	11102 SCHRAUBENFÜHRUNG, LÄNGE 60mm	2
10	11106 Bohrlehre Ø 3.2/40mm	2
11	11137 Gewebeschtutzhülse 80mm	2
12	11138 BOHRLEHRE Ø 4,8/60 MM	2
13	13530 Bohrlehre Ø 2.7mm	2
14	30017 Inbusschlüssel 5mm	1
15	93162 Schrauben – T-Schlüssel QC oder 91150 XCaliber T-Schraubenschlüssel inkl. Adapter	2

Galaxy Fixation Gemini UNIVERSAL-BACKEN (94100, 94300)

sind vollständig kompatibel und können eingesetzt werden in
Verbindung mit

Galaxy Fixation ELLENBOGEN-ZENTRALEINHEIT (93410)




Galaxy Fixation Gemini™-System


Eine vollständige Übersicht finden Sie in GF-2101-OPT Galaxy Fixation Gemini™ Operationstechnik.

Gebrauchsfertige sterile Sets

Galaxy Fixation Gemini™-Standardbacken sind zum einmaligen Gebrauch bestimmt und in sterilen Sets oder sterilen Einzelpackungen erhältlich

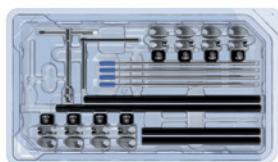


99-94710 Steriles Gemini-Set – Becken

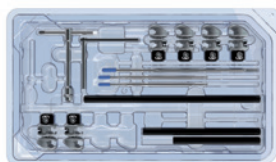


99-94730 Steriles Gemini-Set – Sprunggelenk, 6mm



99-94750 Steriles Gemini-Set – Metatarsal*

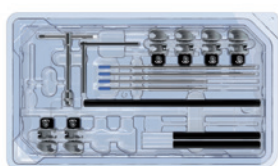


99-94720 Steriles Gemini-Set – Z-Konfiguration

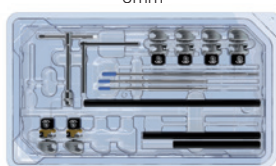


99-94740 Steriles Gemini-Set – Sprunggelenk, 4mm



99-94004 Galaxy Fixation Gemini fuststütz-set, vollständig steril*

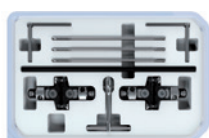

99-94760 Steriles Gemini-Set – Viereck

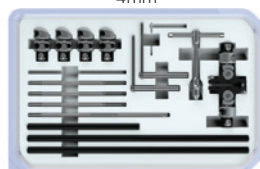

99-94001 Galaxy Fixation Gemini sprunggelenk-set 6mm multischraubenbacke, vollständig steril

*Zu verwenden in Kombination mit dem Sprunggelenk-Set (99-94730, 99-94740 oder 99-94001)

Spezifische Informationen zu Indikationen und Kontraindikationen, Warnhinweisen, Sicherheitsmaßnahmen, Nebenwirkungen und Sterilisation entnehmen Sie bitte der dem jeweiligen Produkt beiliegenden Gebrauchsanweisung.

Eine elektronische Gebrauchsanweisung finden Sie auf der Website <http://ifu.orthofix.it>

Digitale Gebrauchsanweisung – Zugangsmindestanforderungen:

- Internetverbindung (56 Kbit/s)
- Ein Gerät, das PDF-Dateien (ISO/IEC 32000-1) darstellen kann
- Speicherplatz: 50 Mbyte

Ein kostenloses Druckexemplar kann beim Kundenservice angefordert werden (Lieferung innerhalb von 7 Tagen):

Tel. +49 089 354 9999 0, Fax +49 089 354 9999 77,

E-Mail: customerservice@orthofix.de

Achtung: Nach US-amerikanischer Gesetzgebung darf dieses Medizinprodukt nur an einen Arzt oder auf dessen Anweisung verkauft bzw. abgegeben werden. Die Angemessenheit des Eingriffs liegt in der Verantwortung des zuständigen Chirurgen. Die „Operationstechniken“ dienen als Informationsleitfaden. Über ihre Eignung hat der Chirurg aufgrund seiner persönlichen medizinischen Qualifikation und Erfahrung zu entscheiden.



Hersteller:
ORTHOFIX Srl
Via Delle Nazioni 9, 37012 Bussolengo (Verona), Italien
Telefon +39 045 6719000, Fax +39 045 6719380

CE 0123

Rx Only


Orthofix-Produkte oder -Dienstleistungen, auf die hier Bezug genommen wird, sind Marken oder eingetragene Marken von Orthofix SRL und seiner Unternehmensgruppe. Alle Rechte vorbehalten.

Orthofix.com
GalaxyFixation.com



GF-2105-PL-G2 CA 06/23

Vertrieb durch:



ORTHOFIX[®]
ORTHOPEDICS