

Galaxy Fixation

Gemini™ System



Galaxy Fixation

Gemini™ System

Doppio design, infinite soluzioni

Il sistema Galaxy Fixation Gemini™ è un sistema modulare di fissazione esterna per il trattamento di fratture agli arti inferiori e superiori. È utilizzabile come sistema ibrido congiuntamente a fissatori esterni circolari Orthofix.

Semplicità

I morsetti singoli consentono di eseguire accoppiamenti barra/barra e barra/vite.

Versatilità

I morsetti universali possono ospitare barre e viti ossee di diverso diametro, garantendo al sistema modulare versatilità di montaggio per ogni distretto anatomico.

Stabilità

Denti interni e profili di bloccaggio progettati per fornire un'elevata resistenza torsionale ed evitare lo scivolamento dei componenti.

Facile da usare

Sistema a scatto, serraggio provvisorio a mano, chiusura definitiva delle camme in un unico passaggio. Su ogni fessura del morsetto è presente un riferimento che identifica l'esatto diametro delle barre/viti ossee. Morsetti multivite preassemblati.



Morsetti universali Galaxy Fixation Gemini

In configurazione riutilizzabile non sterile

Riferimenti per una facile identificazione del diametro delle barre e delle viti

Ghiera zigrinata modificata e meccanismo di chiusura definitiva

Design intuitivo con verifica visibile per il bloccaggio definitivo, a prescindere dalla posizione del morsetto

Chiusura preliminare manuale

Profilo di interfaccia scanalato del morsetto e serraggio definitivo tramite chiave


- Semplifica la regolazione intraoperatoria della riduzione
- Montaggio rapido della struttura
- È facile da utilizzare: non sono necessari strumenti per la stabilizzazione/chiusura della struttura principale

Forniscono adeguata stabilità alla struttura dopo la chiusura finale

Disponibile anche in versione multivite

Galaxy Fixation Gemini MORSETTO SINGOLO UNIVERSALE (94100)

Consente di eseguire 10 tipi di accoppiamento diversi

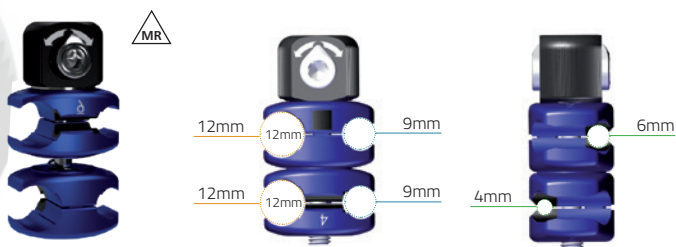

Galaxy Fixation Gemini MORSETTO MULTIVITE DOPPIO UNIVERSALE (94200)




Galaxy Fixation Gemini MORSETTO MULTIVITE UNIVERSALE (94300)




Morsetti standard Galaxy Fixation Gemini

In configurazione monouso sterile

Galaxy Fixation Gemini
MORSETTO SINGOLO
(99-94010)

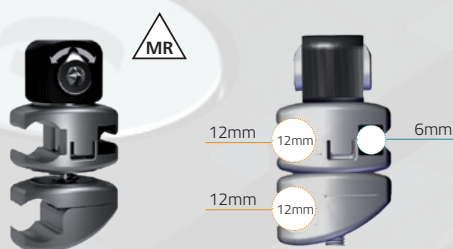


Galaxy Fixation Gemini
MORSETTO DI CONNESSIONE SINGOLO
(99-94030)

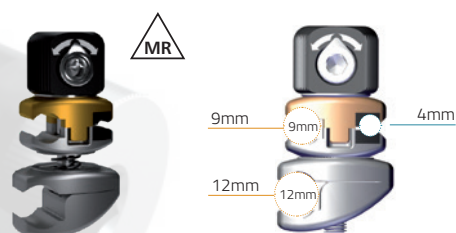

Disponibile anche in versione multivite

Galaxy Fixation Gemini
MORSETTO MULTIVITE DOPPIO
MEDIO (99-94140)

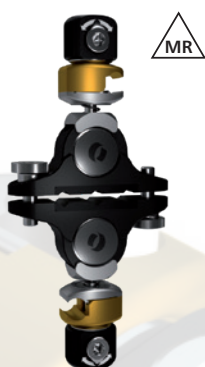

Galaxy Fixation Gemini
MORSETTO MULTIVITE DOPPIO
(99-94040)



Galaxy Fixation Gemini
MORSETTO MULTIVITE
(99-94020)






Tutti i morsetti sono forniti in versione sterile.

Sistema Galaxy Fixation Gemini™

Cassetta di sterilizzazione unica con tutto il necessario

I morsetti universali Galaxy Fixation Gemini™ sono riutilizzabili e disponibili in configurazione non sterile

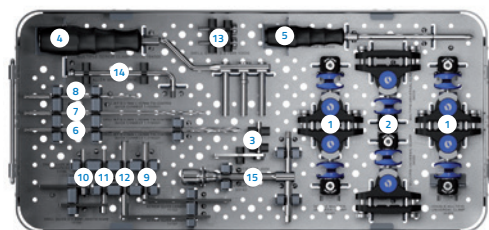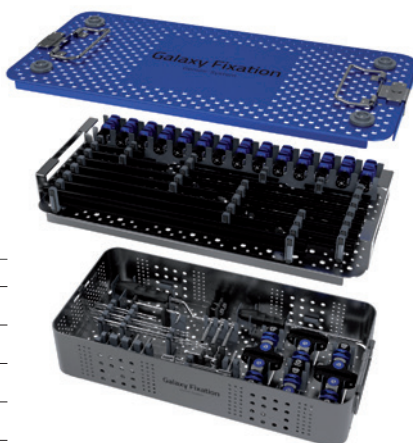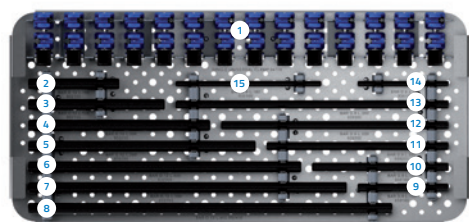

Codice	Descrizione	Quantità
1	94100 GALAXY FIXATION GEMINI MORSETTO SINGOLO UNIVERSALE	14
2	932100 BARRA L100MM D12MM	2
3	932150 BARRA L150MM D12MM	2
4	932200 BARRA L200MM D12MM	2
5	932250 BARRA L250MM D12MM	2
6	932300 BARRA L300MM D12MM	2
7	932350 BARRA L350MM D12MM	2
8	932400 BARRA L400MM D12MM	2
9	939100 BARRA L100MM D9MM	2
10	939150 BARRA L150MM D9MM	2
11	939200 BARRA L200MM D9MM	2
12	939250 BARRA L250MM D9MM	2
13	939300 BARRA L300MM D9MM	2
14	936100 BARRA L100MM D6MM	2
15	936160 BARRA L160MM D6MM	2

Codice	Descrizione	Quantità
1	94200 GALAXY FIXATION GEMINI MORSETTO MULTIVITE UNIVERSALE DOPIO	2
2	94300 GALAXY FIXATION GEMINI MORSETTO MULTIVITE UNIVERSALE	2
3	19995 GUIDA VITE	2
4	194500 GUIDA VITE GALAXY FIXATION GEMINI	1
5	194400 TROCAR GALAXY FIXATION GEMINI	1
6	1-1100201 PUNTA PERFORATORE RIVESTITA L240MM D4.8MM ATTACCO RAPIDO	2
7	1-1100301 PUNTA PERFORATORE RIVESTITA L200MM D3.2MM ATTACCO RAPIDO	2
8	1-1355001 PUNTA PERFORATORE RIVESTITA L127MM D2.7MM ATTACCO RAPIDO	2
9	11102 GUIDA VITE L60MM D6MM	2
10	11106 GUIDA PERFORATORE L40MM D3.2MM	2
11	11137 GUIDA VITE L80MM D6MM	2
12	11138 GUIDA PERFORATORE L60MM D4.8MM	2
13	13530 GUIDA PERFORATORE D2.7MM	2
14	30017 CHIAVE ESAGONALE 5MM	1
15	93162 CHIAVE A T CON ATTACCO RAPIDO 91150 CHIAVE A T UNIVERSALE	2

I morsetti universali
GALAXY FIXATION GEMINI
(94100, 94300)

sono completamente compatibili e utilizzabili con


Galaxy Fixation
SNODO DI GOMITO
(93410)




Sistema Galaxy Fixation Gemini™

Set sterili pronti per l'uso

I morsetti standard Galaxy Fixation Gemini™ sono monouso e disponibili in set sterili o confezioni singole sterili
Fare riferimento alla tecnica operatoria GF-2101-OPT Galaxy Fixation Gemini™ per una panoramica completa

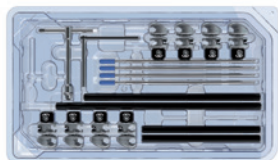


99-94710 Set sterile Gemini per bacino

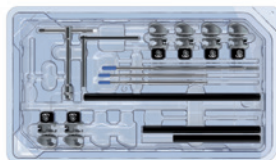


99-94730 Set sterile 6mm Gemini per caviglia



99-94750 Set sterile Gemini per metatarso*

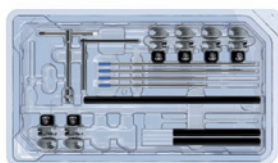


99-94720 Set sterile Gemini con struttura a Z

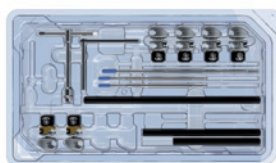


99-94740 Set sterile 4mm Gemini per caviglia



99-94004 Galaxy Fixation Gemini supporto per piede set completo sterile*

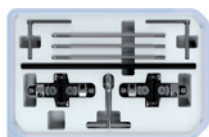

99-94760 Set sterile Gemini quadrilatero

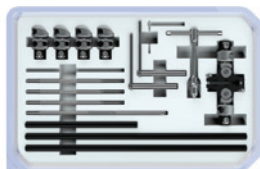

99-94001 Galaxy Fixation Gemini caviglia set 6mm morsetto multivite completo sterile

*Da utilizzare in combinazione con il set caviglia (99-94730, 99-94740 o 99-94001)

Fare riferimento alle "Istruzioni per l'uso" fornite con il prodotto per informazioni specifiche su indicazioni d'uso, controindicazioni, avvertenze, precauzioni, effetti indesiderati e sterilizzazione.

È possibile trovare le istruzioni elettroniche per l'uso sul sito Web <http://ifu.orthofix.it>

Istruzioni elettroniche per l'uso - Requisiti minimi per la consultazione:

- Connessione Internet (56 Kbit/s)
- Dispositivo in grado di visualizzare file PDF (ISO/IEC 32000-1)
- Spazio su disco: 50 MB

È possibile richiedere una copia cartacea gratuita all'assistenza clienti (consegna entro 7 giorni):

tel.: +39 045 6719301, fax: +39 045 6719370,

e-mail: customerservice@orthofix.it

Attenzione: la legge federale statunitense limita la vendita di questo dispositivo esclusivamente da parte, o per ordine di, un medico. La responsabilità di una corretta procedura chirurgica è a carico dei professionisti del settore sanitario. Le tecniche operatorie fornite sono da considerarsi solo come linee guida informative. La scelta della tecnica da utilizzare è responsabilità dei singoli chirurghi, in base alla propria esperienza e alle qualifiche mediche personali.



Prodotto da:

ORTHOFIX Srl

Via Delle Nazioni 9, 37012 Bussolengo (Verona), Italia

Telefono +39 045 6719000, Fax +39 045 6719380

CE 0123

Rx Only

I prodotti o servizi Orthofix qui citati sono marchi di fabbrica o marchi registrati di Orthofix SRL e del rispettivo gruppo. Tutti i diritti riservati.

Orthofix.com
GalaxyFixation.com



GF-2105-PL-11 CA 06/23

Distribuito da:

Orthofix Srl

Via delle Nazioni, 9
37012 Bussolengo (VR)
Tel. +39 045 6719300
Fax +39 045 6719370

 **ORTHOFIX**[®]
ORTHOPEDICS